

INDIVIDUELLE SKO | HØST/VINTER 2016
















KLAVENESS



INNHOOLD

Boa Closure System	2
Dame - nye modeller	4
Herre - nye modeller	5
Sport skor - nye modeller	6
Nye såler	7
Bestillingsformular Individuell lest	8

SYMBOLER

	Lest		3 Vidder
	Størrelse		Dobbel glidelås
	Vidde		Borrelås med retur
	Såle		Lett såle
	Hælhøyde		Belg pløse
	Boa® Closure System		Ice sole med patentert vribar brodd
	Vibram Såle		

Kjære kunde,

Som i våres, presenterer vi nå en ny sesongs brosjyre - denne gangen for høsten.

Vi har mange spennende nyheter. Noen modeller for OAS og OIL kommer med den nyeste Boa lukkemekanismen. Innen kort tid planlegger vi å innføre enda flere modeller med Boa lukkemekanisme.

For den kommende høst, vil du finne nye attraktive modeller for både menn og kvinner.

For vinteren er vi glade for å kunne presentere vår nye patenterte *ice sole* med innebygde brodder, det er modeller tilgjengelig som FIA for både menn og kvinner.

Å bestille lester etter mål kan være utfordrende hvis du ikke arbeider med det regelmessig. Nå har vi forenklet bestillingsrutinene, les mer om det i denne brosjyren. Under vårt neste besøk, vil vi forklare alle muligheter i detalj.

BOA CLOSURE SYSTEM - CONCEPT

Klaveness har utviklet nye OAS og OIL modeller med BOA® lukkemekanisme. Klaveness bruker kun originale produkter fra Boa da det ikke finnes tilsvarende produkter med så høy kvalitet som originalen fra Boa. Vi introduserer systemet til OAS og OIL i et begrenset antall modeller til å begynne med. Hver modell som implementeres må gjennomgå en godkjeningsprosess hos Boa, det garanterer høyeste kvalitet og funksjonalitet.

The Boa Closure System provides the ultimate connection between people and their gear, transforming experiences through a fast, customized, and comfortable fit.

Features & Benefits

The Boa Closure System is transforming how people around the world experience their activities of choice. It does this by delivering a high-performance fit that is:

Fast: The Boa Closure System lets you achieve your precise fit quickly and easily, even on the fly.

Customized: The Boa Closure System is micro-adjustable. Each click of the Boa® Dial equates to one millimeter of tension adjustment.

Comfortable: The low-friction design of the entire Boa® Closure System delivers uniform closure without pressure points.

Durable: The Boa Closure System is constantly being tested and refined, in the lab and out in the field. We design technology to outlast the product it powers.

Secure: Once you click to engage the Boa Closure System, our patented reel technology and stretch-free laces will keep your fit dialed-in all day.



Boa® Closure System

BOA CLOSURE SYSTEM - MODELLER

FM 1008 ORTHO



134 Beige Nappa / 518 Beige Split Leather / 442 Beige Soft Nappa
S212 White EVA, Rubber




212 Black Waxed Nubuck / 208 Black Split Leather / 102 White Soft Nappa
S213 Black EVA, Rubber

FM 1009 ORTHO




202 Black Nappa
S111 Black TR





392 Dark Brown Waxed Nubuck
S112 Beige, Off-white TR

DISSE
MODELLER KAN
IKKE BESTILLES SOM
FIA
MODELLERNE PÅ DENNE SIDEN
ER KUN TILGENGJELIGE SOM
OAS OG OIL

FM 1010 LISA EXTRA




302 Brown Waxed Nubuck
S402 Black TR



202 Black Nappa
S412 Black PU, Rubber

FM 1011 THOR



874 Dark Blue Soft Nappa, 858 Blue Split Leather, 102 White Soft Nappa
S721 White EVA, Rubber



212 Black Waxed Nubuck, 208 Black Split Leather, 102 White Soft Nappa
S721 White EVA, Rubber

NYE MODELLER - DAME

FM 1002
LISA EXTRA




1 - 10


K



202 Black Nappa
S420 Black PU, Rubber



332 Brown Soft Nappa / 337 Dark Brown Pig Velour
S412 Black PU, Rubber

212 Black Waxed Nubuck / 208 Black Split Leather
S412 Black PU, Rubber

FM 1001
ORTHO



1 - 10


K



322 Brown Chevreau
S153 Brown Rubber




202 Black Nappa
S180 Black TR


322 Brown Chevreau
S180 Black TR

NYE MODELLER - HERRE

FM 1394
J0



35 - 50

M



392 Dark Brown Waxed Nubuck
S853 Brown TR



212 Black Waxed Nubuck
S310 Black PU, Rubber

FM 1395
THOR




35 - 50

M



 393 Brown Nappa / 607 Olive Pig Velour / 307 Brown Pig Velour
S740 Black PU, Rubber




 214 Black Nappa / 257 Black Textile / 737 Grey Pig Velour
S740 Black PU, Rubber

FM 1393
THOR


35 - 50

M



 392 Dark Brown Waxed Nubuck
S740 Black PU, Rubber



 212 Black Waxed Nubuck
S740 Black PU, Rubber

NYE MODELLER - SPORT SKOR

FM 1012
ORTHO



1 - 10



K



208 Black Split Leather / 244 Black Textile
S240 White PU, Rubber



208 Black Split Leather / 244 Black Textile
S213 Black EVA, Rubber

208 Black Split Leather / 244 Black Textile
S212 White EVA, Rubber

FM 1013
THOR



35 - 50



M



208 Black Split Leather / 244 Black Textile
S721 White EVA, Rubber

208 Black Split Leather / 244 Black Textile
S640 White PU, Rubber

NYE SÅLER

Ice sole

Klaveness er alltid på utkikk etter nye løsninger for å unngå skliulykker. Et stort problem, spesielt blant eldre. Når skliulykker skjer er det generelt i det øyeblikket du setter ned hælen i bakken på glatt underlag. *Ice sole* ble laget for å unngå slike ulykker. Sålene kan brukes på Lisa Extra og Jo lestene. Vår nye såle har en løs del som er bygget inn i hælen på yttersålen som kan snus etter ønske. Den har en side med pigger og en med gummi. På denne måten kan brukeren enkelt bytte til siden med gummi når skoen brukes innendørs. Sålen har et gummimateriale med meget godt grep. Inne i sålen er det et lag av PU skum som vil isolerer mot kulde og holde føttene varme og komfortable. La vinteren komme - vi er klare for den.

S420



S310



Ortho såle i 3 bredder - Ny farge

En av våre mest populære PU såler for Ortho er nå tilgjengelig i en lysere nyanse av hvit og utvider mulighetene for ulike fargekombinasjoner. Dette er en standard såle i 3 vidder, noe som betyr at du kan bestille et par sko med forskjellig bredde på høyre og venstre fot.


S172 



Sport såle

Klaveness lanserer nye sports skosåler for Ortho og Thor sneakers. Den er laget av et spesielt lett materiale med et gummi mønster innfelt i yttersålen. Det nye lette alternativet er bra for sport sko, joggesko og spasersko. Turgåing og løping blir enklere med denne nye sålen.


S240

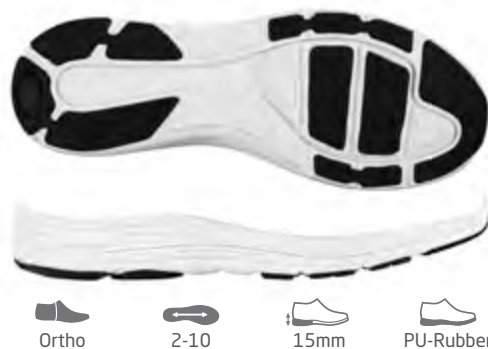

I spesielle tilfeller kan en justering være nødvendig når du bruker S240 såle.



S640

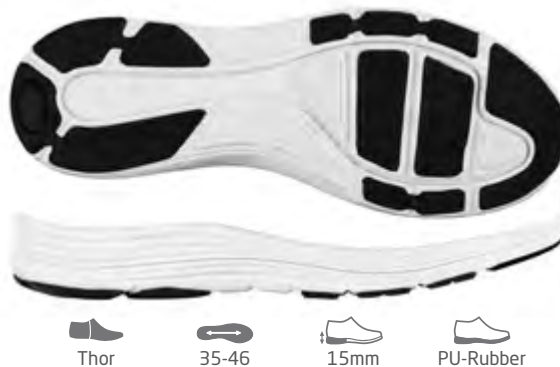

BESTILLINGS FORMULAR INDIVIDUELL LEST

Klaveness har sett på måter å gjøre bestillingsprosessen av individuelle lester enklere og raskere. Vi vet at bestilling av individuelle lester kan være en utfordring. Så vi har tenkte i gjennom og utviklet et nytt og mer brukervennlig bestillingsskjema.

Medsendt grunnlag

Vennligst oppgi hva slags informasjon du sender med bestillingen. Vennligst send så mye informasjon som mulig, fordi det gjør det lettere å produsere en mer nøyaktig lest.

FOTAVTRYKK

Fotavtrykk er en tradisjonell og god måte å beskrive pasientens behov og mål på. Marker de områdene av foten som krever tiltak. Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan man kan måle foten i seksjonen for fotmål.

2D PLANTART FOTO

Bedre og mer nøyaktig enn et fotavtrykk. 2D-plantart bilde fra vår Klaveness skanner. Dette er til stor hjelp når vi modellerer lestene. Ved bestilling, send både 2D plantart bilde og 3D-plantart skann.

GIPSAVSTØPNINGER

Hvis du ikke har mulighet å skanne foten, kan du lage en gipsavstøpning. En gipsavstøpning tilsvarer ikke en 3D Full fot skanning. Vennligst inkluder fotmål og fotavtrykk.

3D PLANTART SKANN

Ett 3D plantart skann fra en Klaveness skanner eller et 3D skann fra foamboks gir oss den informasjonen vi trenger, hvis du vil at vi skal gjøre lesten fotformet plantart. Klaveness skanneren gir oss også et bilde av plantar siden av foten. Dette er verdifull informasjon for å få en optimal bindsåleprofil da vi produserer lesten. 3D skann kombinert med 2D plantart skann gir oss all den informasjonen vi trenger for størrelse, form og bindsåleprofil, slik at vi kan produsere en optimal lest.

3D FULLFOTS SKANN

Ett godt 3D Fullfots skann gir oss all den informasjonen vi trenger for å produsere en optimal lest. Vi aksepterer .ply og STL format.

Leste spesifikasjoner

UTFORMING AV LESTE KAMMEN

I denne delen kan du angi om du ønsker leste kammen tradisjonelt leste formet eller ankelformet. Hvis du ønsker leste kammen ankelformet trenger vi en gipsavstøpning av foten eller et full fots 3D skann. Husk at et fotformet ankelområde er mer egnet for brukere av lav aktivitet da lesten ikke vil gi like godt hæl grep som en tradisjonelt utformet lest.

INDIVIDUELL LEST

KUNDE / ORDRE INFO

100 Kundenavn	105 Bestilt dato
101 Pasient navn	
102 Pasient ref.	107 Leste ref.
103 Bestilt av	108 Risikopasient <input type="checkbox"/>
104 Ordre #	109 Kjønn <input type="radio"/> Mann <input type="radio"/> Kvinne <input type="radio"/>

BASIS INFO

201 Tilhører OIL ordre <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei <input type="radio"/>	202 Testsko <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei <input type="radio"/>
---	--

MEDSENDT GRUNNLAG

203 2D Plantart foto <input type="checkbox"/>	204 Fotavtrykk <input type="checkbox"/>
205 3D Plantart skann <input type="checkbox"/>	206 Gips <input type="checkbox"/>
209 3D Fullfots skann <input type="checkbox"/>	

LESTESPEKIFIKASJON


312 TÅFORM <input type="radio"/> Lisa Extra <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ortho <input type="radio"/> <input type="radio"/> Thor <input type="radio"/> <input type="radio"/> Jo <input type="radio"/> <input type="radio"/> Footform <input type="radio"/> <input type="radio"/> Nåbling <input type="radio"/>
311 Annen Klaveness lest <input type="checkbox"/>

UTFORMING AV LESTEKAM

301 Lesteformet <input type="radio"/>	Fotformet (kun mulig når "3D Fullfots skann" eller "Gips" er medsendt) <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---

BUNNPROFIL PÅ LESTEN

302 Fotformet (kun mulig når "3D skann" eller "Gips" er medsendt) <input type="radio"/>	303 EKSTRA VOLUM (REGULERINGSKORK)								
Standard lesteform <input type="radio"/>	Kun for lester med bunnprofil "Standard lesteform" (mm) <table><tr><th>VENSTRE</th><th>HØYRE</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	VENSTRE	HØYRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENSTRE	HØYRE								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

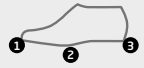

BUNNPROFIL PÅ LESTEN

Her kan du bestemme bunnprofil på lesten. Hvis du ønsker fotformet bunnprofil på lesten trenger vi gipsavstøpning av foten eller 3D skann vedlagt. Husk også å bestille fotsenger i OIL bestillingsskjemaet når du bestiller fotformet bunnprofil på lesten.

Standard bunnprofil gir deg muligheten til å bruke fotsenger produsert fra 3D skann eller gipsavstøpninger. Ønsker du ekstra volum for fotsenger fylles det ut i 303 ekstra volum.

EKSTRA VOLUM

Her oppgir du ekstra volum for plass til fotsenger når du velger standard bunnprofil. Ekstra volum produseres som en justerings kork. Det er flere fordeler med å produsere ekstra volum som en justering kork. Lestens volum tilsvarer alltid fotmålene uten fotseng slik at det er lett å holde styr på fotmålene. Man kan enkelt endre tykkelsen avhengig av hvilken type sko og fotseng man ønsker å bestille.